

FOREO



UFO™

UFO
LED-THERMOAKTIVIERENDE
SMART-MASKE

VOLLSTÄNDIGE BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSTE SCHRITTE

Herzlichen Glückwunsch zum ersten Schritt in Richtung makelloser Haut, durch den Erwerb dieses UFO Geräts. Bevor Sie beginnen, all die Vorteile unsere anspruchsvollen Hautpflege-Technologie zuhause zu genießen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese Anleitung.


Bitte LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH und verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

⚠️ **WARNUNG: EINE VERÄNDERUNG DIESES GERÄTS IST NICHT ERLAUBT.**

UFO IM ÜBERBLICK

Die weltweit eleganteste und intelligente Maske UFO verbindet hoch effektive Hautpflege-Technologien mit exklusiven Maskenformeln - für ein professionelles Hautpflegeerlebnis in Sekunden. Mit der Hyper-Infusion Technologie der UFO verbindet Thermo-Therapie und Cryo-Therapie mit T-Sonic Pulsationen um so die Vorteile der UFO-aktivierenden Masken zu erhöhen. Ausgestattet mit einem kompletten Spektrum an RGB LED Lichttherapien, hilft UFO Ihre Haut komplett zu verjüngern und ein neu definiertes, strahlendes Hautbild zu enthüllen.


LERNEN SIE IHRE UFO KENNEN

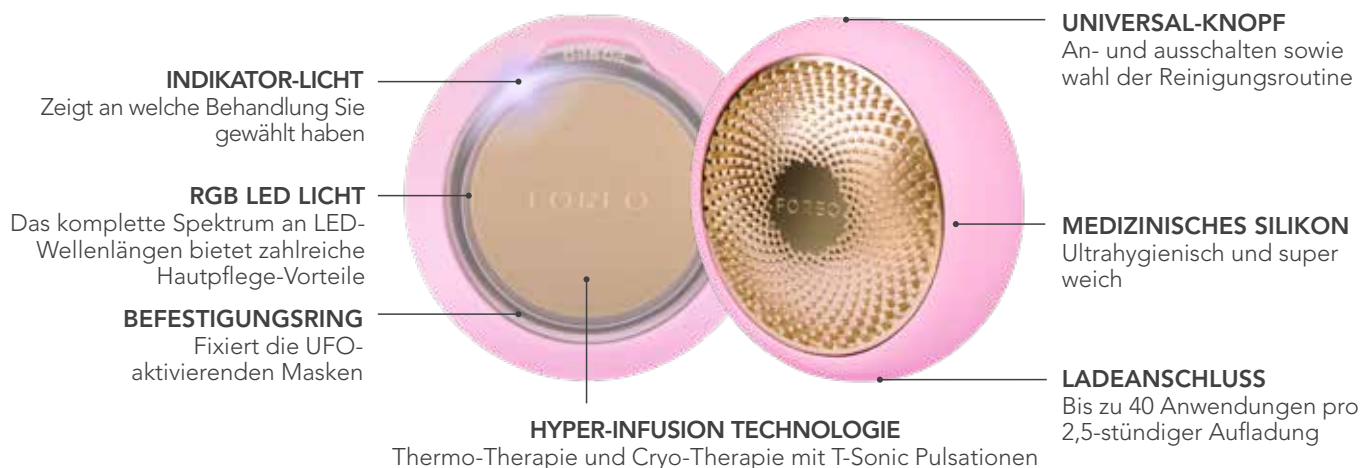

UFO-AKTIVIERENDE MASKE
Exclusive für die UFO Technologie



FOREO APP
Sinkronisiert alle vorprogrammierten Maskenbehandlungen automatisch mit der UFO

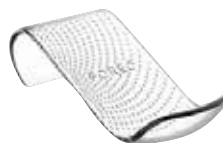

HALTERUNG
Schützt und hält Ihre UFO an Ort und Platz, während sie schneller und einfacher trocknen kann



USB-KABEL
Laden Sie jederzeit und überall

VERWENDUNG DER UFO

- 1 Laden Sie die FOREO App herunter.
- 2 Drücken Sie auf den Knopf, um UFO einzuschalten.
- 3 Scannieren Sie den Strichcode in der App und befolgen Sie die Anweisungen.



FOREO APP hier herunterladen



Entfernen Sie den Befestigungsring von der UFO.



Nehmen Sie die UFO-aktivierende Maske aus der Verpackung.



Sichern Sie die Maske am Gerät, indem Sie sie mit dem Befestigungsring befestigen, mit dem FOREO-Logo nach oben.




Genießen Sie Ihre intelligente Maskenbehandlung.

NEUE MASKE EINFÜGEN

Make My Day und Call It a Night sind vorprogrammiert in Ihrem Gerät. Andere Behandlungen sollen bei der ersten Verwendung in der App aktiviert werden. Danach ist sie in der App verfügbar bzw. kann auf sie durch die Betätigung des Universal-Knopfs zugegriffen werden.



Alle weiteren Maskenbehandlungen

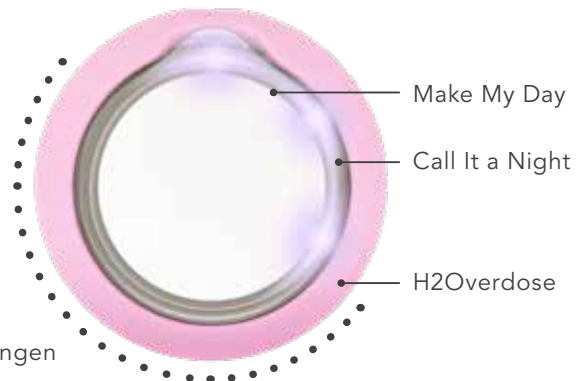

VERWENDUNG DER UFO OHNE APP

- 1 Drücken Sie auf den Knopf, um UFO einzuschalten.
- 2 Erneut drücken, um die Make My Day-Behandlung zu aktivieren, zweimal drücken, um die Call It a Night-Behandlung zu aktivieren usw. Wenn z.B. H2Overdose im Slot 3 in Ihrer App ist, drücken Sie den Universal-Knopf, um UFO einzuschalten und danach 3-mal auf den Knopf drücken, um die H2Overdose-Behandlung zu aktivieren.
- 3 Das Behandlungs-Routing beginnt, nachdem das rosa Licht 10 Sekunden blinkt.

MEHR BEHANDLUNG?

Reicht eine UFO-Behandlung einfach nicht, drücken Sie den Universal-Knopf innerhalb von 30 Sekunden nach dem Ende der Routine noch einmal, um die gleiche Behandlung erneut zu wählen!

ANWENDUNG

- 1 Starten Sie mit sauberer, trockener Haut. Wir empfehlen für bessere Ergebnisse, das Gesicht erst mit der LUNA Gesichtsbürste zu reinigen. Gleiten Sie dann mit der UFO über das Gesicht, um die Maskenessenz gleichmäßig zu verteilen.
- 2 Verwenden Sie den UFO um die Formel in Ihre Haut in kreisenden Bewegungen einzumassieren. Bewegen Sie das Gerät im Uhrzeigersinn um Ihr Gesicht, angefangen vom Kinn bis zur linken Wange zur Stirn. Fahren Sie fort zur rechten Wange zu Kinn und Hals. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis die Behandlung nicht zu Ende geht.
- 3 Nach Beendigung der Behandlung, massieren Sie sanft die Restessenz in Ihre Haut ein oder entfernen Sie den Überschuss mit einem Wattepad.
- 4 Schließen Sie die Behandlung mit Ihrer Feuchtigkeitscreme ab.

*Für die Gesichtsmaske gleiten Sie sanft um die ganze Augenregion, abwechselnd zwischen dem linken und rechten Auge, bis zum Ende der Behandlung.



REINIGUNG DER UFO

Entfernen Sie den Befestigungsring und entsorgen Sie die Maske. Da UFO 100% wasserfest ist, können Sie das Gerät und den Befestigungsring unter warmem Wasser abspülen. Trocknen Sie danach das Gerät einfach mit einem Tuch ab, setzen Sie den Befestigungsring wieder auf und stellen Sie das Gerät in die Halterung.

ANMERKUNG: Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten, da diese Ihre Haut irritieren oder das Silikon beschädigen könnten.

WICHTIG FÜR OPTIMALE SICHERHEIT:

- UFO ist nur mit der dazugehörigen Maske zu verwendet. In keinem Fall sollte das Gerät direkt auf die Haut gehalten werden, während es eingeschaltet ist.
- Sollten Sie Hautprobleme oder andere medizinische Sorgen haben, sprechen Sie sich mit Ihrem Hautarzt ab.
- Die Anwendung mit dem UFO sollte angenehm sein - sollten Sie Beschwerden bemerken, beenden Sie die Anwendung sofort und konsultieren Sie sich mit Ihrem Arzt.
- Verwenden Sie den UFO mit Sorgfalt um Ihre Augenpartie und bringen Sie das Gerät nie direkt in Verbindung mit Ihrem Augenlid oder Augen.
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir nicht das Gerät mit anderen Personen zu teilen.
- Vermeiden Sie für den UFO direkte Sonneneinstrahlung und ebenso extremer Hitze oder kochendem Wasser.
- Eine Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät vor oder in der Nähe von Kinder verwendet wird, sowie bei Personen mit eingeschränkten physischen oder geistigen Fähigkeiten.
- Gebrauchen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt sein sollte. Dieses Gerät beinhaltet keine brauchbaren Ersatzteile.

FEHLERBEHEBUNG

Vorsichtsmaßnahmen im Falle von Änderungen in der Leistung von UFO.

Sollte sich UFO beim Drücken des Universal-Knopfes nicht anschalten:

- Die Batterie ist leer. Laden Sie Ihre UFO per USB-Kabel auf bis das Licht permanent leuchtet. Eine Aufladung von 2,5 Stunden hält für bis zu 40 Anwendungen.

Sollten Sie den UFO nicht an/aus schalten können oder die Bedienfläche reagiert nicht:

- Der Mikroprozessor hat eine vorübergehende Fehlfunktion. Drücken und halten Sie den Knopf um das Gerät neu einzuschalten.

Der UFO synchronisiert sich nicht mit der FOREO App:

- Schalten Sie Ihr Bluetooth aus und wieder ein für eine neue Verbindung.
- Schließen und öffnen Sie die FOREO App erneut.

Falls Sie auf Ihre Frage hier keine Antwort erhalten haben oder Sie eine Frage zum Betrieb des Gerätes haben, besuchen Sie uns unter www.foreo.com/support.

GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

GARANTIEREGISTRIERUNG

Um Ihre 2-Jahres-Gewährleistung und 10-Jahres-Herstellerqualitätsgarantie zu aktivieren, registrieren Sie sich in der FOREO App.

2-JAHRES-GEWÄHRLEISTUNG

FOREO übernimmt auf dieses Gerät eine Gewährleistung von ZWEI (2) JAHREN ab dem Datum des Ersterwerb – für alle Mängel, die auf Fehler bei der Verarbeitung oder des Materials zurückzuführen sind. Die Herstellergewährleistung umfasst alle Bauteile, die die Funktion des Gerätes betreffen. NICHT abgedeckt ist die äußerliche Abnutzung durch normalen Verschleiß oder Beschädigung infolge von Versehen, unsachgemäßem Gebrauch oder Nachlässigkeit. Jeder Versuch, das Gerät (oder dessen Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen führt zum Erlöschen des Garantieanspruches.

Wenn Sie einen Mangel feststellen und diesen FOREO innerhalb der Gewährleistungsfrist mitteilen, wird FOREO nach eigenem Ermessen das Gerät kostenlos ersetzen. Zur Inanspruchnahme der Garantie muss glaubhaft belegt werden können, dass die Garantie zum Zeitpunkt des Antrages noch gültig ist. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkaufbeleg zusammen mit den Garantiebedingungen für den Zeitraum der Garantiedauer auf.

Diese 2-Jahres-Gewährleistung ist exklusiv und hat Vorrang über alle anderen schriftlichen, mündlichen, ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien. Durch die Herstellung, Verkauf oder Benutzung des Produktes werden keine stillschweigenden Garantien vereinbart.

10-JAHRES-HERSTELLERQUALITÄTSGARANTIE

Als Verlängerung der Bedingungen der begrenzten ZWEIJÄHRIGEN (2) Gewährleistung von FOREO berechtigt die zehnjährige (10) Herstellerqualitätsgarantie von FOREO den Besitzer zum Kauf eines neuen Gerätes auf www.foreo.com zu 50 % des Listenpreises.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG


Entsorgung von elektronischen Altgeräten (als Sondermüll entsprechend den in der EU und anderen europäischen Ländern gültigen Vorschriften).



Das durchgestrichene Müllcontainersymbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu der betreffenden Sammelstelle gebracht werden muss. Das recyceln der Materiale hilft die natürlichen Ressourcen zu schützen.

Für mehr Informationen über das Entsorgen Ihres Geräts kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen Entsorgungsdienst.

ENTFERNUNG DER AKKU-BATTERIE

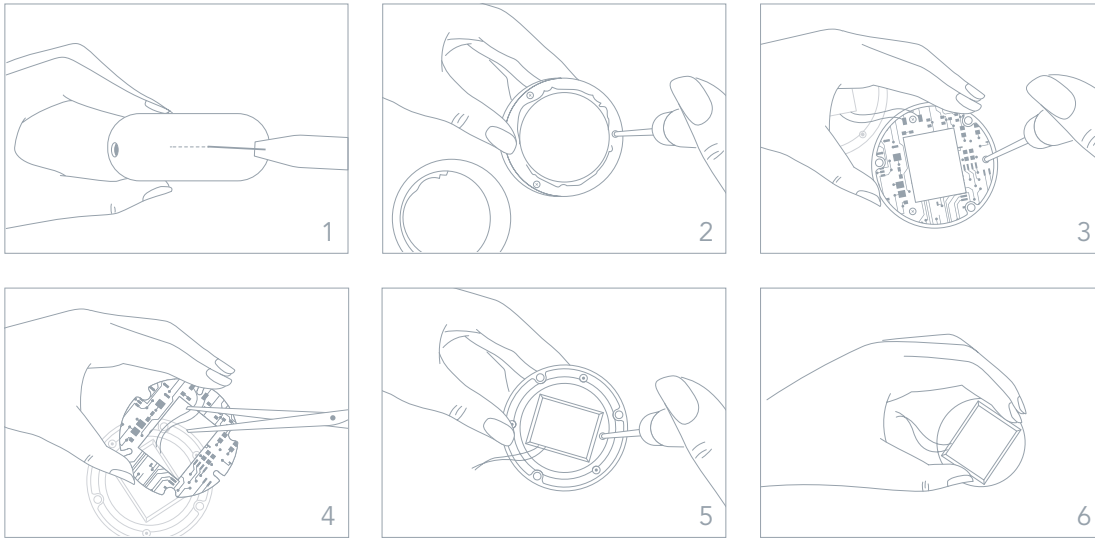

EIGENSCHAFTEN

MATERIAL:	körperfreundliches Silikon & PC + ABC
FARBEN:	Pear Pink/Mint/Fuchsia
GRÖÖE:	72.5 mm x 31.4 mm
GEWICHT:	146.2g
BATTERIE:	Li-Ion 1050mAh 3.7V
BENUTZUNGSDAUER:	bis zu 40 Anwendungen pro Vollladung
STANDBY:	180 Tage
FREQUENZ:	180 Hz
MAX. SCHALLPEGEL:	<50 dB
BEDIENFLÄCHE:	1 Knopf

Hinweis: Die Verwendung dieses Gerätes geschieht auf eigene Gefahr. Weder FOREO noch seine Einzelhändler übernehmen eine Haftung für jegliche Art von Verletzungen oder Schäden, körperlicher- oder anderer Art, die direkt oder indirekt mit der Benutzung dieses Gerätes zusammen hängen. FOREO behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten, ohne verpflichtet zu sein, irgendwelche Personen über eine solche Überarbeitung zu informieren.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können den Benutzer ungültig machen das Gerät zu betreiben. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Die Bedienung unterliegt dem folgende zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HF-Expositionserklärung: Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Exposition gelten. Das Gerät wurde so evaluiert, dass es die allgemeine Anforderung an die HF-Belastung erfüllt. Das Gerät kann in tragbare Belichtungsbedingung ohne Einschränkung.

Verbesserungen des Produkts können ohne Vorankündigung erfolgen.

©2018 FOREO AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

IMPORTEUR UND GROSSHÄNDLER IN DER EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SCHWEDEN

IMPORTEUR UND GROSSHÄNDLER IN DEN USA: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA

HERGESTELLT VON FOREO AB

ENTWORFEN UND ENTWICKELT VON FOREO SCHWEDEN

WWW.FOREO.COM